

CARRO DE LAVADO CL-520 y CL-620

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carro de lavado geriátrico, hidráulico, destinado a personas con movilidad reducida, para las transferencias de la cama a la ducha y para el lavado fácil y confortable de enfermos.

La altura variable de 50 a 80 cm. permite adaptarlo ergonómicamente al cuidador, evitando los riesgos de lumbálgias.

Barandillas laterales de seguridad de 20 cm de altura, abatibles y con acabado "epoxi". Para pacientes de hasta 155 kg.

Estructura fabricada en acero, con tratamiento anticorrosivo.

Bañera fabricada en PVC con forro interior de poliéster guateado de 2 cm de espesor para mayor confort.

Plano de camilla inclinable mediante control manual hasta (+/- 15º) para una correcta gestión y evacuación del agua.

Altura variable mediante actuador hidráulico accionable a través de un pedal bidireccional.

Manillas de empuje en cabeza y pies para facilitar la conducción.

Desagüe de evacuación obturable mediante tapón.

Manguera de evacuación de longitud 185 cm y Ø 4 cm con clip de sujeción en el lateral del plano de la camilla.

* ACCESORIOS OPCIONALES

Ruedas Ø 125 mm con frenos independientes.

Cesta porta ropa conformada en el bastidor del carro.


Cojín cilíndrico: altura 12 cm, longitud 55 cm, anchura 17 cm.

Cojín en cuña de 5º para lograr una leve incorporación.

Freno centralizado con 4 ruedas Ø 150 mm, una de ellas direccional.



“La ergonomía a su alcance para el aseo diario”

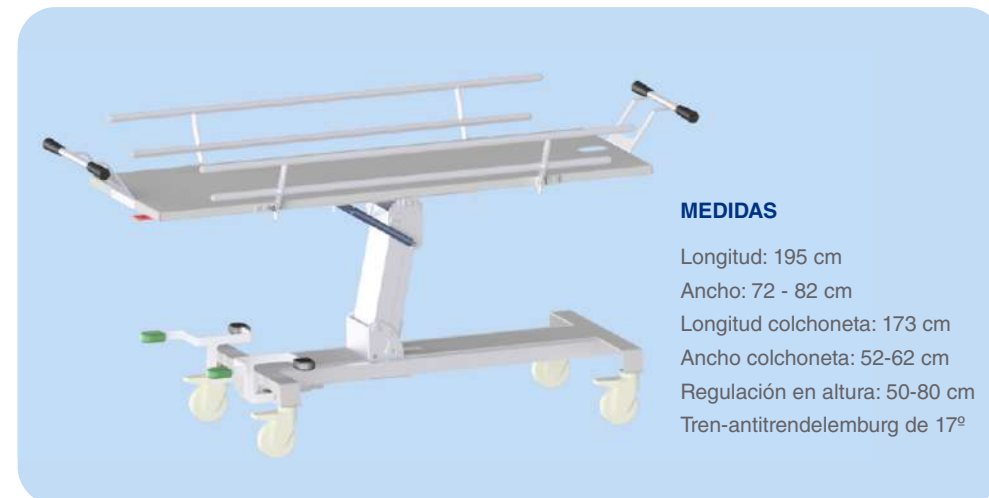

MEDIDAS

Longitud: 195 cm
Ancho: 72 - 82 cm
Longitud colchoneta: 173 cm
Ancho colchoneta: 52-62 cm
Regulación en altura: 50-80 cm
Tren-antitrendelburg de 17º